

### Loading a Vocabulary File



1. Tap **Vocab** > **Choose New Vocab**.
2. A page will display a list of the available vocabulary files. Scroll down to see them all.
3. Select the vocabulary file you want to load.
4. Once loaded, explore the pages and button organization by choosing the buttons.  
*Note:* If you plan to customize a vocabulary file, you must first make a copy of it. Proceed to “Copying a Vocabulary File for Modification”.

### Copying a Vocabulary File for Modification

To modify a vocabulary, make a copy of it and edit the copy. This keeps the original file in place in case it is needed later.

1. Tap **Vocab** > **Choose New Vocab**.
2. Tap **Menu** > **Copy a Vocab**.
3. Tap the vocabulary file to copy.
4. Give the file a new name and description.
5. Tap **Save**.
6. Tap the new file name to open the file.

### Deleting a Customized Vocabulary File

1. Tap **Vocab** > **Choose New Vocab**.
2. Tap **Edit**. The delete icon  will appear to the left of each padlock image.
3. Tap  to the left of the vocabulary you want to delete. “Rename” and “Delete” buttons will appear.
4. Tap **Delete** to delete the file.
5. Tap **Done**.

### Choosing a Voice

1. Choose **Menu** > **Settings**.
2. In the **Speech** section, tap **Voice** to view available voices (listed by language).
3. Tap the blue speaker icon to test a voice. Tap the green cart icon to purchase a voice. Tap the green download icon to install a voice.
4. A checkmark near the voice will show the current voice selection.

### Turning Edit Mode On

1. Go to the page that displays the button to edit.
2. Choose **Menu** > **Edit Page**.
3. The page is now in Edit Mode.

### Editing a Button

1. Once in **Edit Mode**, tap the button you want to modify.
2. In the pop-up menu, tap **Edit This Button**.
3. Tap the menu option or options you want to use (for example, Changing a Button Label or Message, Adding or Changing a Button Action)
4. Tap **Save** to save your changes.
5. Tap **Done** to exit Edit Mode.

### Changing a Button Label or Message

1. While editing a button, tap in the **Button Label area** to change the label that will be displayed on the button.
2. Tap in the **Button Message area** to change the message that will be spoken.

### Adding or Changing a Button Action

1. While editing a button, scroll down to the **Button Actions** section.
2. Tap **Add**.
3. Scroll through the list of actions and tap the action you want. It will be added below the existing action for the button.


### Blocking and Restoring Access to the Editing Menus

There may be times when you need to block access to the Editing menus by requiring a password.

*To password-protect the Editing menus:*

1. In TouchChat, choose **Menu** > **Settings**.
2. Under “Editing”, turn **Use Menu Passcode** on.
3. Tap in the Passcode field, enter your password, and tap **Done**.
4. If you forget the password, use **72584556** to overwrite the existing password.

*To remove password protection from the Editing menus:*

1. Tap **Menu** or **Vocab** to display a password prompt.
2. Enter your password and turn **Use Menu Passcode** off.
3. Tap in the Passcode field and use  to remove the password.
4. Tap **Done** on the keyboard, and tap **Done** in Settings.

*To remove editing from the Navigation Bar:*

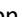
1. Leave the TouchChat app, go to **iOS Settings**.
2. Select **TouchChat (HD/HWP/DS)** on the left panel.
3. Disable **Allow Editing**.
4. Return to TouchChat. The **Vocab** and **Menu** text will disappear.

### Creating a New Page

1. Tap **Menu** > **Edit Page**.
2. Tap **Menu** > **Add New Page**.
3. Choose **New Blank Page** or **New Page from Template**.
4. Name the page to represent its content.
5. Choose the number of rows and columns, the background color, and an image (optional).
6. Tap **Save**.

*Next, create a button to navigate to and from this page.*

### Creating a Button to Link to Your New Page

1. Tap **Menu** > **Load Another Page**.
2. Choose the page you want to link and tap **Done**.
3. Tap the button you want to link to your new page.
4. Tap **Edit This Button**.
5. Give the button a label and, if needed, an icon and make any style changes you want.
6. Scroll down to the Button Actions area and tap **Add**.
7. Tap **Navigate** and tap your new page.
8. Tap an animation or **No Animation**.
9. If you don’t want this button to speak, remove the Speech Message action: tap the **Edit** button, , **Delete**, and **Done**.
10. Tap **Save**.

## Copying and Pasting a Button

Sometimes it's faster to copy an existing button than to create a new one.

1. Tap **Menu > Edit Page**.
2. Tap the button you want to copy.
3. Tap **Copy Button**.
4. Tap **Done**.
5. Go to the page where you want to add the copied button.
6. Once there, tap **Menu > Edit Page**.
7. Tap the location you want to copy the button to.
8. Tap **Paste Button**. The button you copied will appear in that location.
9. Tap **Done**.

## Hiding a Button

1. Tap **Menu > Edit Page**.
2. Tap the button you want to hide and tap **Edit This Button**.
3. Turn **Visible** off.
4. Tap **Save and Done**.

## Hiding Multiple Buttons at Once

1. Tap **Menu > Edit Page**.
2. Tap **Menu > Hide Mode**.
3. Tap the buttons you want to hide or show.
4. Tap **Menu > Normal Mode**.

## Creating and Saving a Profile

1. Configure the settings you want associated with the profile. This includes the vocabulary file, settings, etc.
2. Go to **Menu > Settings > Save Profile**.
3. Tap in the **Profile Name** area to name the profile.
4. Choose **Save**.

## Loading a Profile using the Settings Menu

1. Go to **Menu > Settings > Load Profile**.
2. Tap the preferred profile.

## Loading a Profile by Tapping a Button

1. Choose **Menu > Edit Page**.
2. Tap a button and select **Edit This Button**.
3. Add a label, message, and image as needed
4. Scroll down to the **Button Actions** section.
5. Tap **Add**.
6. Scroll through the list of actions and tap **Select Profile**.
7. Tap **Save and Done**.

## Add or Change a Pronunciation

1. Tap **Menu > Edit Pronunciations**.
2. Tap **+**
3. Under **Word**, type the correct spelling.
4. Under **Pronounce As**, type the word phonetically (as it should be pronounced).
5. Tap **Save > Done**.

## Changing Text Size or Number of Lines in the SDB

1. Tap **Menu > Settings**.
2. Scroll to the **Speech Display Bar** section.
3. Do either of the following:
  - Under **Font Size**, choose a larger font.
  - Under **Number of Lines**, select the number of lines of text you want to appear in the **Speech Display Bar**.

## Backing up a Customized Vocabulary File using AirDrop®, Dropbox®, Google Drive™, Email, or Files

1. In TouchChat, tap **Vocab > Choose New Vocab**.
2. Tap **Menu > Import/Export Vocab > Export and Share**.
3. Select the vocabulary file you want to export.
4. Tap **Done** and select the method to share the file.
  - **AirDrop:** Bluetooth® and Wi-Fi® must be active. You will see the nearby devices that have AirDrop on and can accept your file. Choose the device you want.
  - **Dropbox:** Requires a Dropbox account. Wi-Fi must be active or you must have the Dropbox app on your device.
  - **Google Drive:** Requires Google Drive set up on the device and access to Wi-Fi.
  - **Email:** Requires an email account set up on the device and access to Wi-Fi.
  - **Files:** Select a file location and tap **Save**.

For more information on Backing up and Transferring vocabulary files, please visit [touchchatapp.com](http://touchchatapp.com).

## Updating TouchChat

1. With Wi-Fi turned on, tap the App Store icon.
2. Tap on the profile head in the top right corner.
3. TouchChat will be listed under Updates if there is an update available.
4. Tap **Update** to the right of TouchChat.
5. Enter the Apple® ID that you used to purchase TouchChat previously. The update will start downloading.

Visit the TouchChat Knowledge Base at  
<http://www.touchchatapp.com>

Contact support at  
[support@touchchatapp.com](mailto:support@touchchatapp.com)

### Cargando un archivo de vocabulario

1. Toque **Vocabulario** > **Escoger un vocabulario nuevo**.
2. Aparecerá una página con los archivos de vocabulario disponibles. Deslice hacia abajo para verlos todos.
3. Seleccione el archivo de vocabulario que desee cargar.
4. Una vez lo haya cargado, seleccione los botones para explorar las páginas y la organización de los botones.


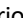
*Nota:* Si planifica personalizar un archivo de vocabulario, primero tendrá que copiarlo. Vea “Copiando un archivo de vocabulario para modificarlo”.

### Copiando un archivo de vocabulario para modificarlo

Para modificar un vocabulario, cópielo y edite la copia. Esto mantendrá el archivo original por si lo necesita luego.

1. Toque **Vocabulario** > **Escoger un vocabulario nuevo**.
2. Toque **Menú** > **Copiar un archivo de vocabulario**.
3. Toque el archivo de vocabulario a copiar.
4. Ingrese un nombre nuevo y una descripción para el archivo.
5. Toque **Guardar**.
6. Toque el nombre del archivo nuevo para abrirlo.

### Borrando un archivo de vocabulario personalizado

1. Toque **Vocabulario** > **Escoger un vocabulario nuevo**.
2. Toque **Editar**. El símbolo de borrar  aparecerá a la izquierda de cada imagen de un candado.
3. Toque  a la izquierda del vocabulario que desea borrar. Aparecerán las opciones de “Cambiar nombre” y “Borrar”.
4. Toque **Borrar** para borrar el archivo.
5. Toque **OK**.

### Seleccionando una voz

1. Seleccione **Menú** > **Configuraciones**.
2. En la sección de **Habla**, toque **Voz** para ver las voces disponibles (listadas por idioma).

3. Toque el símbolo azul del altavoz para probar una voz. Toque el símbolo del carrito verde para comprar una voz. Toque el símbolo de descarga verde para instalar una voz.
4. Una marca de cotejo cerca de la voz mostrará la voz actualmente seleccionada.

### Activando el Modo de edición

1. Vaya a la página que muestra el botón que desea editar.
2. Seleccione **Menú** > **Editar página**.
3. Ahora la página estará en Modo de edición.

### Editando un botón

1. Una vez esté en **Modo de edición**, toque el botón que desea modificar.
2. En el menú emergente, toque **Editar este botón**.
3. Toque la opción de menú o las opciones que desea usar (por ejemplo, Cambiando la etiqueta o el mensaje de un botón, Añadiendo o cambiando una función de un botón)
4. Toque **Guardar** para grabar los cambios.
5. Toque **OK** para salir del Modo de edición.

### Cambiando la etiqueta o el mensaje de un botón

1. Según edite un botón, toque el área de la etiqueta del botón para cambiar la etiqueta.
2. Toque el área del mensaje del botón para cambiar el mensaje a hablar.

### Añadiendo o cambiando una función de un botón

1. Según edite un botón, deslice hacia abajo a la sección de **Funciones del botón**.
2. Toque **Añadir**.
3. Busque la función deseada entre la lista de funciones. Se añadirá bajo la función existente para el botón.


### Bloqueando y restaurando acceso a los menús de edición

Puede ser que a veces tenga que bloquear acceso a los menús de edición mediante una contraseña.

*Para bloquear los menús de edición con una contraseña:*

1. En el TouchChat, seleccione **Menú** > **Configuraciones**.
2. Bajo “Edición”, active **Usar código de acceso para el menú**.
3. Toque el campo de Código de acceso, ingrese su contraseña y toque **OK**.
4. De olvidar la contraseña, use **72584556** para borrar y sustituir la contraseña existente.

*Para quitar la protección de contraseñas de los menús de edición:*

1. Toque **Menú** o **Vocabulario** para mostrar el aviso para ingresar la contraseña.
2. Ingrese su contraseña y desactive **Usar código de acceso para el menú**.
3. Toque el campo de Código de acceso y use  para quitar la contraseña.
4. Toque **OK** en el teclado y toque **OK** en Configuraciones.

*Para quitar el modo de edición de la barra de navegación:*

1. Para salir de la aplicación de TouchChat, vaya a las **Configuraciones** (“Settings”) del iOS.
2. Seleccione **TouchChat** (HD/WPS/DS) en el panel izquierdo.
3. Desactive **Permitir edición** (“Allow Editing”).
4. Regrese al TouchChat. El texto de **Vocabulario** y **Menú** desaparecerán.

### Creando una página nueva

1. Toque **Menú** > **Editar página**.
2. Toque **Menú** > **Añadir página nueva**.
3. Seleccione **Página nueva en blanco** o **Página nueva partiendo de plantilla**.
4. Ingrese un nombre para la página que represente su contenido.

5. Seleccione la cantidad de filas y columnas, el color de trasfondo y una imagen (opcional).
6. Toque **Guardar**.

Luego cree un botón para navegar hacia y desde esta página.

### Creando un botón para enlazarlo a la página nueva

1. Toque **Menú > Cargar otra página**.
2. Seleccione la página a la cual desea enlazar y toque **OK**.
3. Toque el botón que desea vincular a la página nueva.
4. Toque **Editar este botón**.
5. Ingrese una etiqueta para el botón y, de ser necesario, añada un símbolo y cambie el estilo según desee.
6. Baje a la sección de Funciones del botón y toque **Añadir**.
7. Ingrese **Navegar** y toque su página nueva.
8. Ingrese una animación o toque **Ninguna animación**.
9. Si no desea que el equipo hable al tocar el botón, quite la función de mensaje de habla: toque el botón de **Editar**, **−**, **Borrar** y **OK**.
10. Toque **Guardar**.

### Copiando y pegando un botón

A veces es más rápido copiar un botón existente que crear uno nuevo.

1. Toque **Menú > Editar página**.
2. Toque el botón que desea copiar.
3. Toque **Copiar botón**.
4. Toque **OK**.
5. Vaya a la página donde desee añadir la página copiada.
6. Una vez esté ahí, toque **Menú > Editar página**.
7. Toque la ubicación donde desee copiar el botón.
8. Toque **Pegar botón**. El botón copiado aparecerá en esa ubicación.
9. Toque **OK**.

### Escondiendo un botón

1. Toque **Menú > Editar página**.
2. Toque el botón que desea esconder y toque **Editar este botón**.
3. Apague la opción de **Visible**.
4. Toque **Guardar** y **OK**.

### Escondiendo varios botones a la vez

1. Toque **Menú > Editar página**.
2. Toque **Menú > Modo de esconder**.
3. Toque los botones que desee esconder o mostrar.
4. Toque **Menú > Modo normal**.

### Creando y grabando un perfil

1. Configure las configuraciones que desea vincular con el perfil. Esto incluye el archivo de vocabulario, las configuraciones, etcétera.
2. Vaya a **Menú > Configuraciones > Grabar perfil**.
3. Toque el área de **Nombre del perfil** para ingresar un nombre para el perfil.
4. Seleccione **Guardar**.

### Cargando un perfil del menú de configuraciones

1. Vaya a **Menú > Configuraciones > Cargar perfil**.
2. Toque el perfil deseado.

### Cargando un perfil tocando un botón

1. Seleccionando **Menú > Editar página**.
2. Toque un botón y seleccione **Editar este botón**.
3. Añada una etiqueta, un mensaje y una imagen según desee.
4. Deslice a la sección de **Funciones del botón**.
5. Toque **Añadir**.
6. Vaya a la lista de funciones y toque **Seleccionar perfil**.
7. Toque **Guardar** y **OK**.

### Añadiendo o cambiando una pronunciación

1. Toque **Menú > Editar pronunciaciones**.
2. Toque **+**
3. Bajo Palabra, ingrese la pronunciación correcta.
4. Bajo Pronunciar como, delectree la palabra fonéticamente (según se deba pronunciar).
5. Toque **Guardar > OK**.

### Cambiando el tamaño del texto o cantidad de líneas en la BVH

1. Seleccione **Menú > Configuraciones**.
2. Vaya a la sección de **Barra de visualización del habla**.
3. Haga cualquiera de los siguientes:
  - Bajo Tamaño de la fuente, seleccione una fuente más grande.

- Bajo Cantidad de líneas, seleccione la cantidad de líneas de texto que desea que aparezcan en la Barra de visualización del habla.

### Restaurando un archivo de vocabulario personalizado mediante AirDrop®, Dropbox®, Google Drive™, Email o Files

1. En el TouchChat, toque **Vocabulario > Escoger un vocabulario nuevo**.
2. Seleccione **Menú > Importar/Exportar Vocabulario > Exportar y compartir**.
3. Seleccione el archivo de vocabulario que desea exportar.
4. Toque **OK** y seleccione el método para compartir el archivo.
  - **AirDrop:** Bluetooth® y Wi-Fi® tendrán que estar activos. Verá los equipos cercanos que tienen AirDrop activados y pueden aceptar el archivo. Seleccione el equipo deseado.
  - **Dropbox:** Requiere una cuenta de Dropbox. Deberá tener Wi-Fi activo o la aplicación de Dropbox en su equipo.
  - **Google Drive:** Requiere configurar Google Drive en su equipo y acceso a Wi-Fi.
  - **Email:** Requiere una cuenta de correo electrónico en su equipo y acceso a Wi-Fi.
  - **Files** (archivos): Seleccione una ubicación para el archivo y toque **Guardar**.

Para más información sobre cómo restaurar y transferir archivos de vocabulario, por favor visite a [touchchatapp.com](http://touchchatapp.com).

### Actualizando TouchChat

1. Con el Wi-Fi activado, toque el símbolo de la aplicación (“App Store”).
2. Toque un perfil en la esquina superior derecha.
3. El TouchChat estará listado bajo Actualizaciones si hay una actualización disponible.
4. Toque **Actualizar** a la derecha del TouchChat.
5. Ingrese el Apple® ID que usó para comprar TouchChat previamente. La actualización comenzará a descargar.

Visite el TouchChat Knowledge Base por <http://www.touchchatapp.com>  
Contacte al centro de apoyo por [support@touchchatapp.com](mailto:support@touchchatapp.com)